



) Pour être belle dans votre peau (

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|   |  |
|---|--|
| Alimentation                              | 220 V +/- 10% - 50/60 Hz                             |
| Consommation                              | 110 VA   |
| Classe de sécurité                        | Classe 1 type BF en accord avec les normes IEC 601-1 |
| Dimensions                                | 45 x 34 x 15 cm                                      |
| Poids                                     | 9 Kg   |
| <b>Actuateur :</b>                        |  |
| - Oscillation (peeling 100%)              | 150 microns +/- 30%                                  |
| - Fréquence                               | 25 Khz +/- 10%                                       |
| <b>Actuateur LPDT (en option) :</b>       |  |
| - Oscillation                             | 150 microns +/- 30%                                  |
| - Fréquence                               | 25 Khz +/- 10%                                       |
| - LPDT bleu, vert, rouge, jaune           |  |
| <b>Laser</b>                              |  |
| - Intensité                               | Classe en accord avec les normes IEC 825-1           |
| - Longueur d'onde                         | 3,5 mW continu                                       |
|   | 650 nm +/- 10 nm                                     |
| <b>MLM : Micro-courants Lotti Modules</b> |  |
| Forme d'onde du courant                   | 2500 Hz DC libre                                     |
|   | Onde sinusoïdale 6Khz amplitude modulée à 100 Hz     |
|   | Signal diphasé diadynamique                          |
| Courant maximal en sortie                 | 8 mA @ (01: 10K) Ω                                   |
| Voltage maximal en sortie                 | 8 V @ 1K Ω   |

## ) VS PHYSIO (

Importateur exclusif France / pays Francophones / Pologne / Suisse  
**La Malpierre • Saint-Valbert • 70300 LUXEUIL-LES-BAINS (FRANCE)**  
 Tél. : (33) 03 84 40 62 82 • Fax : (33) 03 84 40 62 83 • E-mail : vs.physio@wanadoo.fr



IKONA - 001/2006

RAJEUNISSEMENT HAUTE TECHNOLOGIE

RÉSULTATS VISIBLES DÈS LA 1<sup>E</sup> SÉANCE



Ces technologies innovantes aux résultats étonnants d'efficacité représentent une alternative à la médecine esthétique,

elles répondent aux attentes des clients qui sont à l'affût de moyens naturels, soft et efficaces.

) L'alternative à la chirurgie esthétique (

QU'EST-CE QUE SKIN MASTER ?



SKIN MASTER PLUS

Skin Master est le fruit de 10 années de recherches menées en collaboration avec l'Université de Rome. Le résultat est un instrument révolutionnaire pour le rajeunissement de la peau et inégalable pour la prévention du vieillissement. Les soins avec Skin Master ne provoquent aucune gêne. Les effets produits sont absolument stupéfiants et sont constatés à l'œil nu dès le premier traitement.

Skin Master est un système breveté de soins visage et il est la combinaison de cinq appareils avec autant de technologies différentes :

- 1 • "onde élastique", une énergie puissante de nature piezo-électrique pour un vrai peeling efficace,
- 2 • MLM (Microcourants Lotti Modulés) pour reconstruire la molécule de la jeunesse et le collagène,
- 3 • "laser" pour un comblement de rides,
- 4 • vacuothérapie pour drainer et éliminer les œdèmes du visage et du cou,
- 5 • LPDT : lumière pulsée pour optimiser le travail cellulaire de l'épiderme et du derme.



SKIN MASTER MAX


UNE COMBINAISON DE 4 TECHNOLOGIES POUR UN MAXIMUM DE RÉSULTATS

PEELING


Skin Master réalise un vrai peeling et pas un simple gommage. La couche cornée est éliminée, ce qui a pour effet d'accélérer le turnover cellulaire. Après 6 à 8 séances, on a réalisé un spectaculaire renouvellement de la peau avec un effet lifting marqué. Dans le même temps, Skin Master exerce un nettoyage profond, avec élimination des cellules mortes, du sébum en excès, du maquillage résiduel et d'autres substances toxiques. Les comédons sont également expulsés, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux douloureuses pressions. En outre, le phénomène de "cavitation" très puissant, généré par "l'onde élastique", détruit les germes pathogènes présents, coresponsables de certaines pathologies (ex : acné). La peau redevient immédiatement lisse, débarrassée de toute impureté, stérile, avec pores et follicules pileux libres.



Exfoliation de la couche cornée. Accélération de la régénération cellulaire.

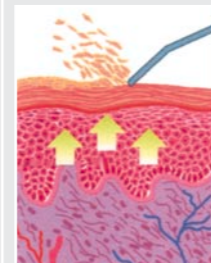

Élimination du sébum, substances toxiques, bactéries pathogènes.

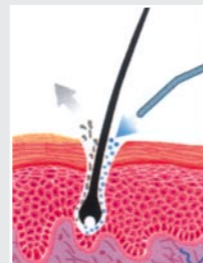

HYDRATATION

La déshydratation, la perte de fermeté et l'élasticité de la peau représentent les principales menaces pour la santé et la beauté de l'épiderme. Skin Master permet d'obtenir une hydratation parfaite. En effet, après le traitement peeling, les voies d'accès de la peau sont libres et réceptives et il est facile, à travers elles, d'introduire des solutions hydratantes spécifiques ou de l'eau naturelle, offrant ainsi une hydratation exogène, parfaite et bienfaisante.



CIRCULATION

Cette fonction est très efficace pour rééquilibrer le métabolisme local, surtout sur les peaux au teint cireux, terne, inégal, où les processus de renouvellement cellulaire sont ralentis à cause d'un apport médiocre en substances nourrissantes dû à une mauvaise circulation. Ce traitement produit une hyperhémie efficace due à la compression-décompression des structures soumises au micro-massage de "l'onde élastique".



RÉGÉNÉRATION

Ce programme utilise les micro-courants "MLM". Il constitue un puissant activateur du métabolisme local. La sénescence précoce due à des facteurs externes et au ralentissement général de l'activité de synthèse peut être efficacement combattue avec Skin Master. Les électrodes très particulières -"circulaire" et "sélective"- de Skin Master stimulent le métabolisme des zones à traiter et réalisent une véritable action de rajeunissement et de prévention anti-rides. En quelques séances, la peau redevient résistante et élastique, la plupart des rides et des signes de vieillissement disparaissent, le visage semble remodelé et acquiert à nouveau toute sa splendeur.



Stimulation du métabolisme local. Augmentation de l'activité de synthèse.



Régénération tissulaire améliorée de 300 %.




LASER / COMPLEMENT DE RIDES


Cette nouvelle technologie met pour la première fois en synergie d'action les micro-courants "MLM" et le LASER pour le comblement des rides. Avec l'âge on constate une diminution considérable du collagène et des glucosaminoglycanes qui, capables de fixer d'importantes quantités d'eau, maintiennent la peau jeune et ferme. Skin Master, par l'émission des "MLM-laser" stimule au niveau du derme la phase inflammatoire exsudative, "œdème exsudatif" (le sillon de la ride se gorge de glucosaminoglycanes, d'oxygène et de substances nutritives). Il s'ensuit une prolifération de fibroblastes, lesquels synthétisent le collagène. Grâce à ce mécanisme, le collagène n'est plus introduit depuis l'extérieur, mais est produit par le corps.



Œdème par réaction inflammatoire exsudative. Apport de glucosaminoglycanes / Oxygène et substances nutritives.

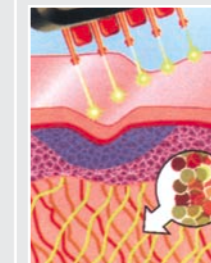

Régénération tissulaire avec aplanissement des rides. Restructuration des fibres de collagène.

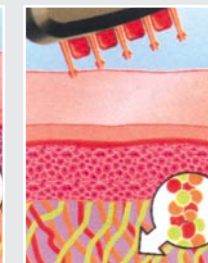

SKIN MASTER MAX

RAFFERMISSEMENT / VACUO

Le vacuo laser combine 2 techniques : le dépresso-massage associé à une micro diode laser qui stimule le système lymphatique et augmente le métabolisme cellulaire. La synergie entre la succion et le laser provoque un effet lifting sur les rides, stimule le collagène et l'élastine, augmente la circulation sanguine locale, draine et élimine les œdèmes, les toxines du visage et du cou.



INTENSE PHOTO DYNAMIC TRAITEMENT (LPDT) UNIQUEMENT SUR SKIN MASTER MAX

Le LPDT est basé sur la découverte que des agents biochimiques de la peau sont activés par exposition à des fréquences particulières de lumière. Skin Master, grâce à l'association de l'onde élastique et de la lumière pulsée intense (led) peut maintenant fournir des traitements de la peau, ciblés, encore plus efficaces et sur mesure. L'énergie lumineuse est convertie en énergie cellulaire dans les différentes couches de l'épiderme et du derme. L'association LPDT avec le peeling permet d'obtenir d'excellents et surprenants résultats.

